


スイングロータ Swing Rotor T4SS6

最高回転速度: 3,800rpm
 Max. Speed
 最高遠心加速度: 3,150×g
 Max. R.C.F.
 全 容 量: 3,000ml=750ml×4
 Nominal Rotor Capacity

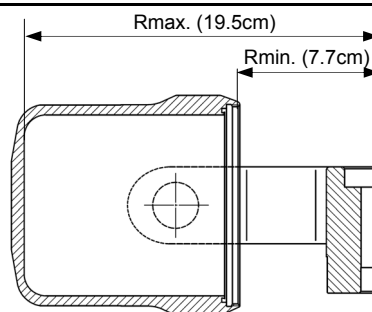

適用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表 Summary of Adapters, Tubes, Bottles

アダプタ Adapter 品名・Part No. Name・Part No	チューブ Tube/ボトル Bottle 品名・Part No.・寸法 (mm)・呼称容量・材質 Name・Part No・Size (mm)・Capacity・Material	最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. R.C.F) (Rmax)
コーニング社製 500mL サポート クッション (品番 431124) Cushion (Corning®431124)	 500 mL 遠沈管 (メーカー *1) Screw Cap Conical Bottom Centrifuge Tubes (Maker *1) Cat. No.431123 (D)96X(L)147 500 mL ポリプロピレン Polypropylene	3,800rpm (3,150xg) (Rmax:19.5cm)
_____	 PC ボトル(メーカー *2) PC Bottle with Screw-On Cap (Maker *2) Cat.No.358299 (D)96X(L)130 750 mL ポリカーボネイト Polycarbonate	3,800rpm (3,150xg) (Rmax:19.5cm)
_____	 PP ボトル(メーカー *2) PP Bottle with Screw-On Cap (Maker *2) Cat.No.356855 (D)96X(L)130 750 mL ポリプロピレン Polypropylene	3,800rpm (3,150xg) (Rmax:19.5cm)
_____	 円筒型広口沈殿瓶 (メーカー *3) Centrifuge Bottle (Maker *3) Cat.No.25 35 90 (D)98X(L)136 650 mL ポリカーボネイト Polycarbonate	3,800rpm (3,150xg) (Rmax:19.5cm)
_____	 円筒型広口沈殿瓶 (メーカー *3) Centrifuge Bottle (Maker *3) Cat.No.25 35 91 (D)98X(L)136 650 mL ポリプロピレン Polypropylene	3,800rpm (3,150xg) (Rmax:19.5cm)
_____	 円筒型広口沈殿瓶 (メーカー *3) (*4) Centrifuge Bottle (Maker *3) Cat.No.25 35 80 (D)98X(L)152 750 mL ポリカーボネイト Polycarbonate	3,800rpm (3,150xg) (Rmax:19.5cm)
_____	 円筒型広口沈殿瓶 (メーカー *3) (*4) Centrifuge Bottle (Maker *3) Cat.No.25 35 81 (D)98X(L)152 750 mL ポリプロピレン Polypropylene	3,800rpm (3,150xg) (Rmax:19.5cm)

オプション対応 Optional accessory	
品名・Part No.・材質 Name・Part No・Material	
 シールドキャップ Shield cap S413400A (4 個組 pcs.) ポリカーボネイト Polycarbonate	

- * 1:コーニングインターナショナル株式会社
- * 1: Corning Inc.
- * 2:ベックマン・コールター株式会社
- * 2: Beckman Coulter Inc.
- * 3: Herolab GmbH Laborgeräte
- * 4: シールドキャップは、使用できません。
- * 4: Cannot accept the shield cap.

※市販品のチューブ、ボトル等は、メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用するとチューブ、ボトル等が破損する場合があります。

※When using tubes, bottles, etc. on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the manufacturer and do not use any tube, bottle, etc. whose allowable speed or RCF is not specified. Otherwise the tubes, bottles, etc. may be broken during operation.

- ・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
- ・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.